


MEDIVATORS

# PULL THRU™

Kanaalreiniger



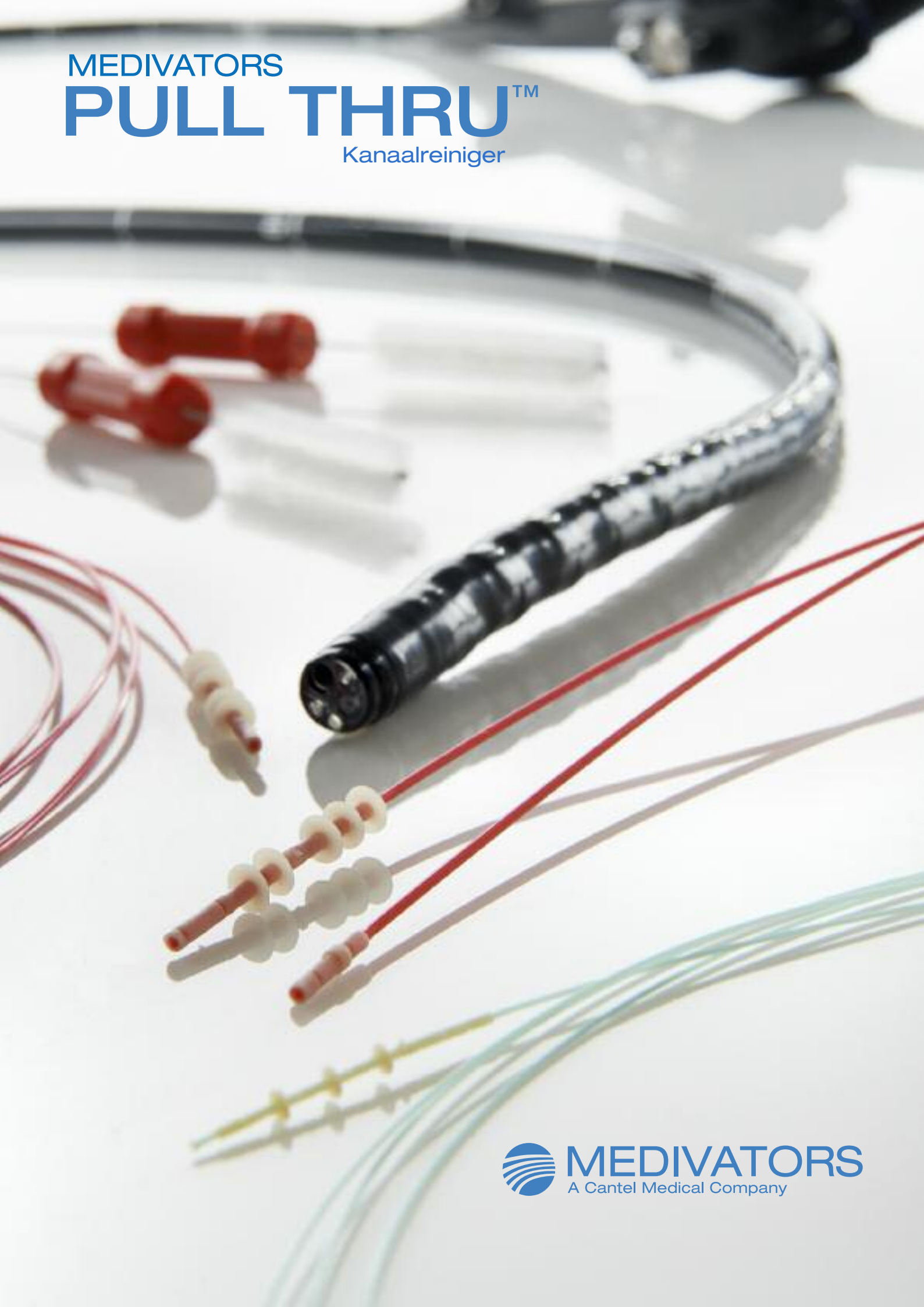

# MEDIVATORS PULL THRU™ Kanaalreiniger

## Verbeterde manuele reiniging in minder tijd

### PULL THRU™ Kanaalreiniger


- Zachte kunststofvegers vormen een ronde afdichting van 360°.
- Verwijdert in één beweging tot 96 % vuil uit het kanaal.
- Verkort de manuele reinigingstijd en maakt een consistente manuele reinigingsmethode mogelijk.
- Een speciaal uiteinde voorkomt het binnendringen in een kanaal met een te kleine binnendiameter.
- Dankzij de elastomere schijftechnologie is de PULL THRU Kanaalreiniger net zo efficiënt bij één beweging per kanaal als vijf bewegingen met een harde borstel<sup>1</sup>.
- Verwijdert vuil doeltreffend uit endoscoopkanalen zonder te schuren of de kanalen te beschadigen.
- Alle stappen die doorlopen worden bij de reiniging van herbruikbare borstels worden met deze kanaalreiniger voor eenmalig gebruik geëlimineerd.
- Als de endoscoop in het detergentbad ondergedompeld wordt, creëert de kanaalafdichting van 360° met behulp van de vegers een zuigkracht waardoor het detergent in het kanaal getrokken wordt en zo contact kan maken met alle oppervlakken in het kanaal.

Bron:

<sup>1</sup> Dr. A. Frase, et al. Hospital Infection Research Laboratory, Queen Elizabeth Hospital. Evaluatierapport. PULL THRU ENDOSCOPE CHANNEL CLEANING DEVICE [PULL THRU KANAALREINIGER]. Maart 2012.

# Verbeter de efficiëntie van uw manuele reinigingsprocessen

Vegers

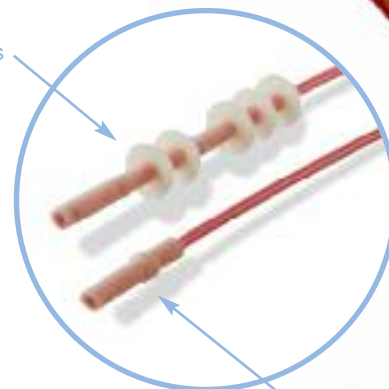


Uiteinde

De PULL THRU Kanaalreiniger wordt uit het andere uiteinde van het kanaal getrokken.

Het uiteinde wordt eerst in het kanaal geschoven en vervolgens de kunststofvegers.

Aangezien de endoscoop ondergedompeld is, wordt er detergent door de kanalen getrokken met behulp van de ronde afdichting van 360° en de vegers.

Opmerking: de PULL THRU Kanaalreiniger moet zo lang door kanalen worden bewogen tot deze schoon zijn.

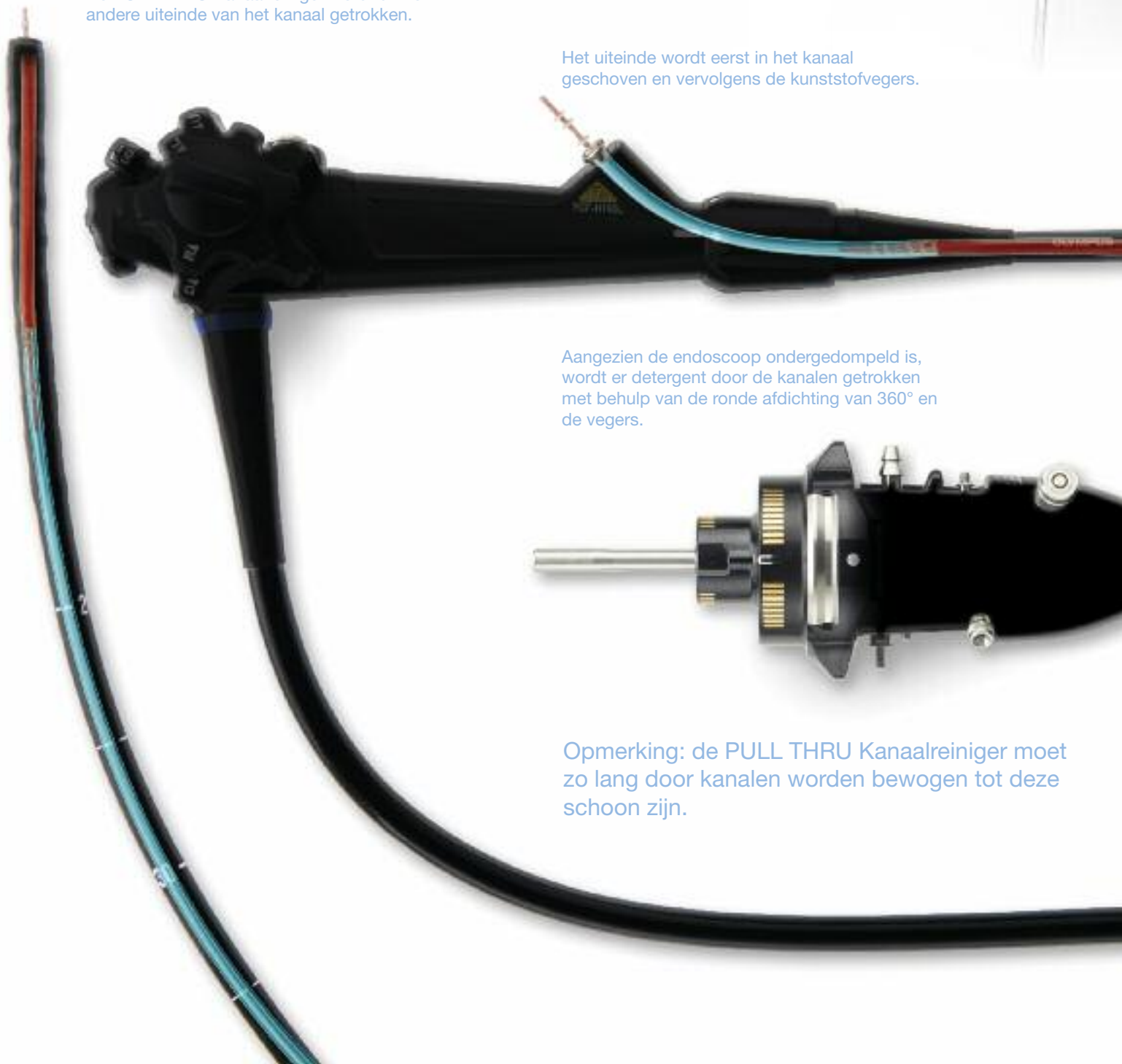

## PULL THRU™ Kanaalreiniger en STUBBY BRUSH



PULL THRU™  
Kanaalreiniger



STUBBY BRUSH™



mini PULL THRU™  
Kanaalreiniger



Balloon PULL THRU™  
Kanaalreiniger



micro PULL THRU™  
Kanaalreiniger

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

**PULL THRU**  
ENDOSCOPES  
De beste reiniging voor kanalen

### PULL THRU™ Kanaalreiniger

Onderdeelnummer	Beschrijving	Binnendiameter kanaal (mm)	Werklengte (cm)
100407	PULL THRU Kanaalreiniger	2.8-5.0	2200
100404	STUBBY BRUSH	–	–
100410	mini PULL THRU Kanaalreiniger	1.4-2.6	2200
100413	mico PULL THRU Kanaalreiniger	1-1.2	2200
100414	Balloon PULL THRU Kanaalreiniger	2.8-5	2500
100408	PULL THRU Cassette	–	–

PULL THRU™, mini PULL THRU™, Balloon PULL THRU™, micro PULL THRU™ en STUBBY BRUSH™ zijn handelsmerken van F.R. Galantai Manufacturing Company Limited.



Medivators Inc.  
14605 28th Avenue North  
Minneapolis, MN  
55447-4822 USA  
Tel: +1.763.553.3300  
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV  
Sourethweg 11  
6422 PC Heerlen  
The Netherlands  
Tel: +31.45.5.471.471  
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel Medical (UK) Limited  
Wolsey House  
Staffordshire Technology Park  
Beaonside, Stafford ST18 0GA  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1785.782420  
Fax: +44 (0) 1785.782421

Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.  
1A International Business Park  
#05-01 Singapore 609933  
Tel: +65.6227.9698  
Fax: +65.6225.6848

Cantel Medical Devices (China) Co., Ltd.  
Unit 804-805, Innov Tower Block A,  
1801 Hongmei Road, Xuhui 200233,  
Shanghai, China  
Tel: +8621.6016.1380  
Fax: +8621.6121.0913

[www.medivators.eu](http://www.medivators.eu)

© 2016 Medivators Inc. P/N 50098-1085-NL A