

ENDO STRATUS™

Pompe d'irrigation et insufflateur de CO₂



Insufflation de CO₂ avancée pour des examens plus rapides et de meilleurs résultats patients


TEMPS DE GESTION DES PATIENTS PLUS COURT*

- Taux d'intubation caecale amélioré ¹
- Profondeurs d'intubation de l'intestin grêle plus importantes ²
- 38% de réduction de l'attention de l'infirmière

SATISFACTION DES PATIENTS PLUS ÉLEVÉE

- Moins d'inconfort, de douleurs et de ballonnements^{3,4,1}
- Temps de récupération plus courts⁴
- Réduction de la distension gazeuse
- Absorption 150 fois plus rapide que l'air ambiant et élimination rapide par les poumons

Douleur et inconfort du patient – CO₂ / air ambiant

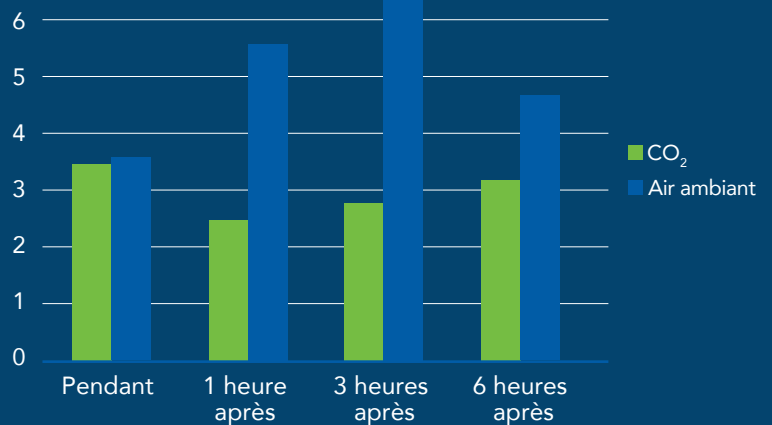


Fonctionnement par simple bouton-poussoir ON/OFF

Débits variables – faible, modéré et élevé

Connexion Luer-Lock - Compatible avec les tubulures d'irrigation/insufflation ENDO SMARTCAP™ et les tubulures hybride ENDOGATOR™

La technologie à eau chaude réduit les risques de côlon irritable

CO₂ chauffé – 37°C

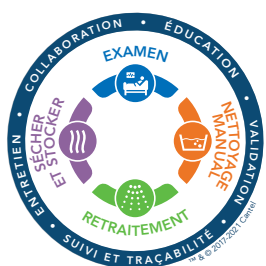

LE CERCLE COMPLET DE PROTECTION

En tant que chef de file mondial en matière de prévention des infections, **seul Cantel offre le Cercle Complet de Protection**, un partenariat proactif à valeur ajoutée qui vise à vous aider à éliminer les risques, à rationaliser l'efficacité opérationnelle et à optimiser votre réussite.

EXAMEN Réduire le risque de contamination croisée des patients est la préoccupation première dans la prévention des infections. Cantel propose des produits de contrôle des infections conçus pour optimiser l'organisation opérationnelle et améliorer le contrôle infectieux.



INSUFFLATEUR DE CO₂ ENDO STRATUS™

Compatible avec

- Les connections murales ou bouteilles CO₂
- Tous les principaux endoscopes GI

POMPE D'IRRIGATION ENDO STRATUS™

Compatible avec

- Tous les principaux endoscopes GI

La pompe comporte une pédale à pied universelle confortable

L'irrigation par eau chaude améliore votre visibilité et le confort de votre patient

Porte-bouteille ajustable avec chauffe-eau intégré

Débit ajustable facilement et rapidement

Compatible avec les tubes et connecteurs ENDOGATOR™

Le bouton d'amorçage automatique permet une irrigation instantanée dès que la pédale est enfoncée





INFORMATIONS DE COMMANDE DES POMPES ENDO STRATUS™

NUMÉRO D'ARTICLE	DIMENSIONS
EGA-500E	Pompe d'irrigation ENDO STRATUS™
EGA-501E	Unité d'insufflation ENDO STRATUS™
EGA-7012	Étrier de réservoir
EGA-7029	Double étrier de réservoir
EGA-7020	Tuyau flexible de +-1 mètre (basse pression)
EGA-7023	Tuyau flexible de +-3 mètre (basse pression)
EGA-7011	Tuyau flexible de réservoir de +-1 mètre (haute pression)
EGA-7024	Tuyau flexible de +-3 mètre (haute pression)

1. Singh, R., Neo, E., & Nordeen, N. (juillet 2012). Carbon dioxide insufflation during colonoscopy in deeply sedated patients (insufflation de dioxyde de carbone au cours de la coloscopie chez des patients en sédation profonde). *World Journal of Gastroenterology*, 18(25), 3250-3253.
2. Bretthauer, MD, PhD, M. (2010). Turning science into clinical practice – the case of carbon dioxide insufflation (Transformer la science en pratiques cliniques – cas de l'insufflation de dioxyde de carbone). *Endoscopy* 2010, 42(0), 1104-1105. doi:http://dx.doi.org/ 10.1055/s-0030-1255973
3. Bretthauer, MD, PhD, M. (septembre 2007). Carbon dioxide insufflation improves intubation depth in double-balloon enteroscopy: a randomized, controlled, double-blind trial (L'insufflation de dioxyde de carbone améliore la profondeur d'intubation lors d'entérocopies à double ballon : essai randomisé, contrôlé, à double insu). *Endoscopy* 2007, 39(0), 1064-1067. doi:DOI 0.1055/s-2007-966990
4. Lynch, MBA, BSN, RN, Hayes BSN, RN, CGRN, Buffum DNSc, APRN, CS. (2012). Insufflation Using CO2 vs Room Air During Colonoscopy: Comparison of Patient Comfort, Recovery Time, and Nursing Resources (Insufflation CO2 contre air ambiant durant la coloscopie : étude comparative du confort du patient, du temps de récupération et des ressources infirmières) [diaporama PowerPoint]. Veterans Affairs Medical Center San Francisco.

ENDO STRATUS™, ENDO SMARTCAP™ et ENDOGATOR™ sont des marques déposées de Medivators Inc.

© 2017-2021 Cantel. All Rights Reserved. The Complete Circle of Protection diagram is a trademark owned by Cantel Medical Corp. and is subject to copyright protection owned by Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu

Medivators BV | t: +32 (0)38 080 707 | e: csnl@medivators.com

© 2021 Cantel Medical Corp. LIT-00236/A-FRBE

