


# ENDO STRATUS™

Spülpumpe und CO<sub>2</sub>-Insufflator



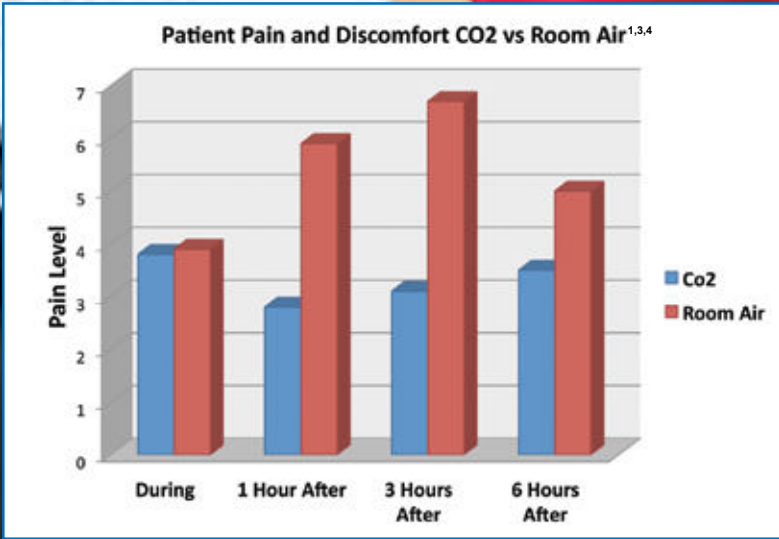

**ES IST BEWIESEN, DASS CO<sub>2</sub>-INSUFFLATION  
SCHNELLERE BEHANDLUNGEN ERMÖGLICHT, ZU EINER BESCHLEUNIGTEN  
GENESUNG FÜHRT UND ANGENEHMER FÜR DIE PATIENTEN IST.**

**SCHNELLERE PATIENTENBEHANDLUNG**

- Verbesserte Erreichbarkeit des Blinddarms<sup>1</sup>
- Tiefere Einführung bis in den Dünndarm<sup>2</sup>
- 38% weniger Nachversorgung notwendig<sup>4</sup>

**HÖHERE PATIENTENZUFRIEDENHEIT**

- Weniger Unwohlsein, Schmerzen und Blähungen<sup>1,3,4</sup>
- Schnellere Genesung<sup>4</sup>

1. Singh, R., Neo, E., & Nordeen, N. (Juli 2012). Carbon dioxide insufation during colonoscopy in deeply sedated patients. World Journal of Gastroenterology, 18(25), 3250-3253.  
 2. Bretthauer, MD, PhD, M. (2010). Turning science into clinical practice – the case of carbon dioxide insufation. Endoscopy 2010, 42(10), 1104-1105. doi:http://dx.doi.org/ 10.1055/s-0030-1255973  
 3. Bretthauer, MD, PhD, M. (2007, September). Carbon dioxide insufation improves intubation depth in double-balloon enteroscopy: a randomized, controlled, double-blind trial. Endoscopy 2007, 39(10), 1064-1067. doi:DOI 10.1055/s-2007-966990  
 4. Lynch, MBA, BSN, RN, Hayes BSN, RN, CGRN, Buffum DNSc, APRN, CS. (2012). Insufation Using CO2 vs Room Air During Colonoscopy: Comparison of Patient Comfort, Recovery Time, and Nursing Resources [PowerPoint Folien]. Veterans Affairs Medical Center San Francisco.

# KLEINE VERÄNDERUNG, ENORME VERBESSERUNG

## ENDO STRATUS™ CO<sub>2</sub>-INSUFFLATOR

- CO<sub>2</sub> wird 150 mal schneller als Raumluft im menschlichen Körper aufgenommen und sofort über die Lunge ausgeschieden
- Auf 37°C erwärmtes CO<sub>2</sub> kann Darmspasmen und Auskühlung vorbeugen
- Regelbare Durchflussmenge:
  - niedrig (1,4 l/min)
  - mittel (2,4 l/min)
  - hoch (3,5 l/min)



### KOMPATIBEL MIT

- ENDO SMARTCAP™ Einwegschlauch zur Linsenreinigung und Insufflation
- Flasche (D oder E) oder NIST-Wandanschluss für CO<sub>2</sub>
- Allen gängigen GI-Endoskopen

# VERBESSERTE SICHT UND HÖHERER PATIENTENKOMFORT


## ENDO STRATUS™ SPÜLPUMPE

- Die Warmhalteplatte hält die Temperatur des vorgewärmten Wassers bei 37°C und kann dadurch Darmspasmen und Auskühlung vorbeugen
- Die Prime-Funktion ermöglicht eine sofortige Spülauslösung bei Betätigung des Fußpedals durch die Vorbefüllung des Schlauchsystems
- Gezieltes und druckreguliertes Spülen über Waterjet- oder Biopsiekanal (Y-OPSY™ Biopsie-Irrigator) möglich



### KOMPATIBEL MIT

- ENDOGATOR™ Schläuchen und Anschlüssen
- Allen führenden GI-Endoskopen

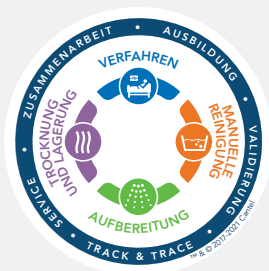

## VOLLSTÄNDIGER SCHUTZZYKLUS

Als globaler Vorreiter im Bereich Infektionsprävention bietet nur **Cantel den vollständigen Schutzzyklus**. Mit unseren innovativen und effizienten Lösungen für jeden Prozessschritt, senken Sie nachweislich Risiken von Kreuzkontaminationen und sparen gleichzeitig Zeit und Kosten für Anwender und Personal.

**VERFAHREN** Die Risiko-Reduktion von Kreuz- & Rekontaminationen steht im Vordergrund der Infektionsprävention. Wir entwickeln und produzieren sterile Einwegprodukte „Made in USA“, welche die Patienten und Anwender nachhaltig schützen und gleichzeitig die Effizienz der Verfahren erhöhen.



## CO<sub>2</sub>-Wagen: Einfach, Sicher, Stabil

- Praktischer Transport und Lagerung von zwei 5-Liter CO<sub>2</sub>-Flaschen
- Die ENDO STRATUS™ Spülpumpe und der ENDO STRATUS™ CO<sub>2</sub>-Insufflator können auf die obere Ebene aufgesetzt werden
- Besonders reißfeste Gurte sichern die ENDO STRATUS™ Spülpumpe und den ENDO STRATUS™ CO<sub>2</sub>-Insufflator für den geschützten Transport zwischen den verschiedenen Räumen

### BESTELLINFORMATIONEN ENDO STRATUS™-WAGEN

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
EGA-7040	Gabelanschlussstück mit DIN-Anschluss
EGA-7045	Halterung – Gabelanschlussstück
EGA-7029	Gabelanschlussstück mit DIN-Anschluss
EGA-9042	ENDO STRATUS™-Wagen



### BESTELLINFORMATIONEN ENDO STRATUS™ SPÜLPUMPE UND CO<sub>2</sub>-INSUFFLATOR

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
EGA-500E	ENDO STRATUS™ Spülpumpe
EGA-501E	ENDO STRATUS™ CO <sub>2</sub> -Insufflator
EGA-7011	Flaschenschlauch, 1 Meter (Hochdruck)
EGA-7024	Flaschenschlauch, 3 Meter (Hochdruck)
EGA-2071	NIST-Adapter
EGA-7026	Flaschenanschluss nach DIN
EGA-7012	Flaschenanschluss mit Bügel nach dem Pin-Index-System

ENDO STRATUS™, ENDO SMARTCAP™, ENDOGATOR™ und Y-OYPSY™ sind eingetragene Marken von Medivators Inc.

Alle anderen Firmen- oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2017-2021 Cantel. Alle Rechte vorbehalten. Das Diagramm „Vollständiger Schutzzyklus“ ist eine Marke der Cantel Medical Corp. und unterliegt dem Schutz des Cantel Medical Corp. zustehenden Urheberrechts.

[www.cantelmedical.eu/de](http://www.cantelmedical.eu/de)

BESTELLANNAHME | t: +49 (0) 821 27893 920 (Kundendienst)

f: +49 (0) 821 27893 79 | e: csde@cantelmedical.de

© 2021 Cantel Medical Corp. 50098-689/D-DE

