


ADVANTAGE PLUS™

Endoscoop reinigings- en desinfectiemachine

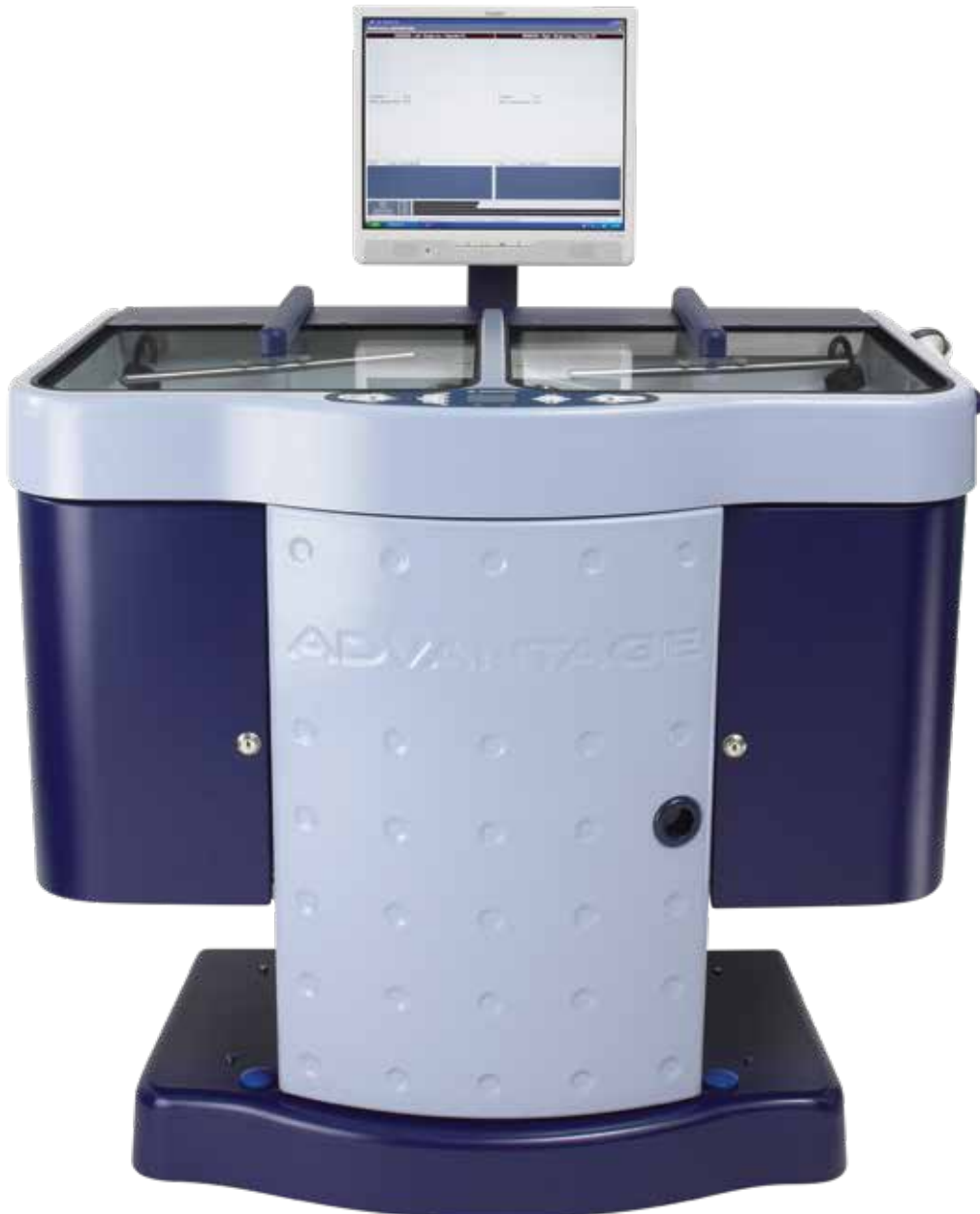

EEN BETROUWBARE EN GEAVANCEERDE REPROCESSOR VOOR ENDOSCOPEN VAN DE MARKTLEIDER

VOOR DE REINIGING EN DESINFECTIE VAN MEERDERE SOORTEN ENDOSCOPEN

- Compatibel met alle flexibele endoscopen
- Gevalideerd voor de reiniging en desinfectie van TEE/TOEprobes, dilators, cystoscopen en half-kritische starre scopen

CONTINUE CONTROLE VAN DE ENDOSCOOPKANALEN

- Garandeert correcte hookup verbinding
- Controleert endoscoopkanalen op verstoppingen
- Garandeert dat alle kanalen correct worden gereinigd en gedesinfecteerd

REINIGINGSCYCLUS VAN HOGE KWALITEIT

- Waarborgt contacttijd
- Optimaliseert het desinfectie proces van de endoscoop
- Gedocumenteerde wascyclus

GEAUTOMATISEERDE LEKTEST

- Maakt het mogelijk dat de endoscoop voorafgaand aan reparatie wordt gedesinfecteerd
- Minimaliseert aan lekken gerelateerde reparatiekosten
- Maakt het drogen van de endoscoopkanalen gemakkelijker

NETWERKEN EN DIAGNOSTIEK OP AFSTAND

- Koppelingen met externe software pakketten beschikbaar
- Verbind aan lokale of off-site server voor gecentraliseerde gegevensverzameling en praktische back-up
- Snelle technische ondersteuning via online diagnostiek en diagnostiek op afstand

RAPICIDE™ PA HOOGWAARDIG DESINFECTIEMIDDEL

- Bewezen compatibiliteit met de endoscoop
- Snellere beschikbaarheid van de endoscoop
- Minder blootstelling voor de medewerker; milieuvriendelijk
- Desinfectie met lage temperaturen en vrij van aldehyde



COMPLETE CIRCLE OF PROTECTION

Cantel, wereldwijd leider in infectiepreventie, levert als enige de volledige beschermingscyclus. Een volwaardig, proactief partnerschap dat u helpt om risico's te elimineren, operationele efficiëntie te stroomlijnen en uw succes te optimaliseren.

REPROCESSING High-level desinfectie is de hoeksteen van infectiepreventie. De reinigings- en desinfectie-technologieën van Cantel zijn ontworpen om de veiligheid van de patiënt te verzekeren door naleving van de meest strikte normen voor hoogwaardige desinfectie. Optimalisering van de workflow, de compatibiliteit met een verscheidenheid aan endoscopen en de betrouwbaarheid en consistentie maken onze producten uniek.

ADVANTAGE PLUS™

Reinigings- en desinfectiemachine voor endoscopen

Uitgebreid gegevensbeheer van de cyclus

Visuele weergave van real-time informatie over de reiniging en desinfectie

Barcodelezer voor snelle en nauwkeurige gegevensinvoer.

Grote, eenvoudig te laden, onafhankelijke bassins met asynchrone werking en geschikt voor alle flexibele endoscopen



Hoogwaardige reinigingscyclus

Individuele kanaalbewaking voor endoscoop en hookup

Diagnostiek op afstand voor efficiënt onderhoud



Handenvrije dekselbediening biedt gebruiksgemak en vermindert het risico op kruisbesmetting



Handige cassette ter bescherming van de endoscoop en ter preventie van kruisbesmetting



ADVANTAGE PLUS™ REINIGINGS- EN DESINFECTIEMACHINE BESTELINFORMATIE

MODELNUMMER	BESCHRIJVING
ADV-2005	ADVANTAGE PLUS™ RAP PA AIAR 20C met luchtcompressor
ADV-2006	ADVANTAGE PLUS™ RAP PA 20C zonder luchtcompressor

Afmetingen

150 H x 114 W x 92 D cm (59 H x 45 W x 36 D inches)
 Hoogte deksel: Open - 137 cm (54"), gesloten - 97 cm (38")
 Diepte met luchtcompressor: 95 cm (37,5")

Gewicht

182 kg (400 lbs)

Elektrische vereisten

100-240 VAC ± 10%; één fase, 50/60HZ; 1000 watt

Elektrische veiligheids-certificering

ETL Intertek genoteerd #75811
 UL-norm 61010-1
 EN-norm 61010-1
 CSA/CAN-norm C22.2, nr. 61010-1

Watertoevoer

Minimumdebiet: 5 LPM (1,32 GPM) bij 2,4 tot 6 bar (5 tot 87 PSI)
 Watertemperatuur:
 (35 °C ± 2 °C) - Noord-Amerika; (25 °C ± 2 °C) - Internationaal
 Hardheid: minder dan 200 ppm (12 gpg)
 Pre-filter muurruimte: 66 H x 96 B x 15 D cm (26 H x 38 B x 6 D inch)

Afmeting bassin

48 H x 43 L x 18 D cm (19 B x 17 L x 7 D inch)



ADVANTAGE PLUS™ en RAPICIDE™ zijn handelsmerken van Medivators Inc.

© 2017-2020 Cantel. Alle rechten voorbehouden. The Complete Circle of Protection diagram is een handelsmerk van Cantel Medical Corp. en valt onder de auteursrechtelijke bescherming van Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu

Medivators BV | t: +31 (0)45 547 1471 | t: +32 (0)38 080 707 | e-mail: csnl@medivators.com

© 2020 Cantel Medical Corp. LIT-00329/A

