

SURESTORE™

Endoskoplagerung und -transport

Trocknung und Lagerung



CANTEL FREUT SICH, DAS SURESTORE™ ENDOSKOPLAGERUNGS- UND TRANSPORTSYSTEM VORZUSTELLEN.

In Großbritannien von unserem erfahrenen Ingenieurs- und Technikteam entwickelt, liefert die SURESTORE™ Endoskoplagerungs- und -transportlösung eine erstklassige sterile, langfristig aktive Aufbewahrungs- und -transportmöglichkeit für alle gängigen Endoskope. Direkt nach der Aufbereitung im Reinigungs- und Desinfektionsgerät, kann das Endoskop ohne weitere Trocknung in die SURESTORE™ Endoskoplagerungs- und -transporteinheit eingesetzt werden, in der die Lagerung dann für bis zu 100 Tage validiert ist. Das einzigartige Design und die innovative Technologie der SURESTORE™ Endoskoplagerungs- und -transporteinheit liefert Ihnen ein „patientenfertig“ verpacktes Endoskop innerhalb von 10 Minuten.

SURESTORE™
Lagerung und Transport



ADVANTAGE PLUS™
Pass-Thru
Endoskopaufbereiter



CLEANSCOPE™
Transport- und Kurzzeit-
lagerungssystem



Aufbereitetes
verpacktes
Endoskop



Krankenhaustransport



Abteilungsübergreifender
Transport



Regionaler Transport

Bequeme Bedienung über Touchscreen

Einfach lesbare Informationen zu Zyklusfortschritt und unabhängiger Überwachung der Kanäle

Konturierte Schale für die sichere und zuverlässige Endoskopaufbewahrung (kompatibel mit dem CLEANASCOPE™ Transport- und Kurzzeitlagerungssystem)


Kompatibel mit dem steril verpackten CLEANASCOPE™ Foliensystem zur Reduzierung von Kreuzkontaminationen

Abschließbare Schublade mit integriertem PC und Tastatur zur Platzeinsparung

Vollständige Nachverfolgbarkeit durch ausdrückbare Zyklusdaten

Große abschließbare Aufbewahrungsschublade mit integriertem Stauraum für Verbrauchsmaterialien und Prozesschemikalien

Separat arretierbare Rollen

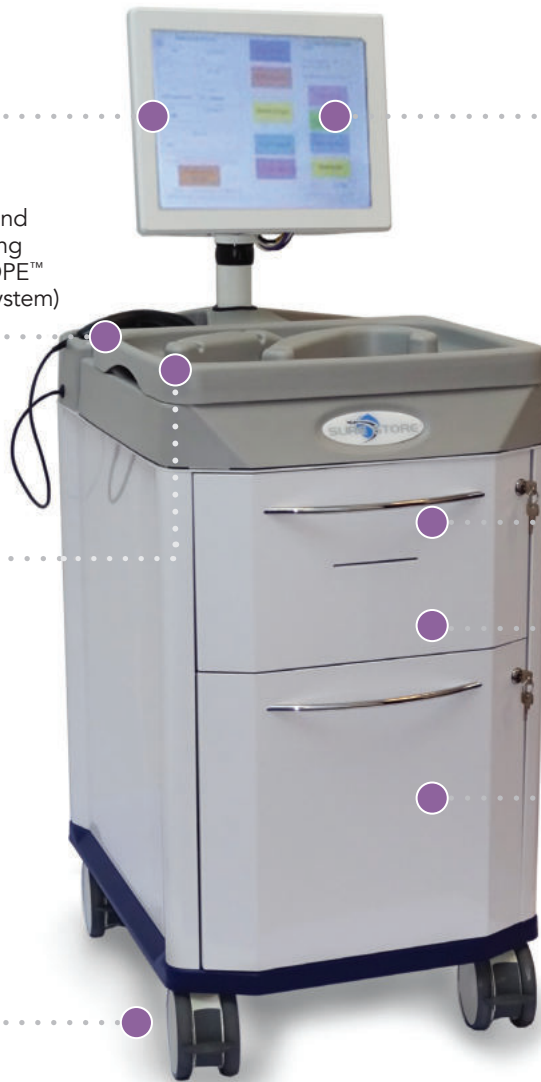

Die SURESTORE™ Endoskoplagerungs- und -transportlösung ermöglicht die unmittelbare Bereitstellung von Endoskopen für Notfälle, nach Dienstschluss, an Wochenenden und für mobile Einsätze. Die Endoskope können einfach und sicher mit dem TRAVELSCOPE™ Transportbehältnis für mobile Einsätze innerhalb verschiedener Abteilungen eines Krankenhauses oder zu externen Zweigstellen transportiert werden.

- 100 Tage validierte Aufbewahrung
- Unabhängiges Überwachungssystem
- Reduzierter Verschleiß der Endoskope
- Flexible und geschützte Transportlösung
- Vollständige Nachverfolgbarkeit der Zyklusdaten
- Schnelle und einfache Anwendung
- Sichere Lagerung für maximalen Endoskopschutz
- Platzsparende Aufbewahrungslösung
- Unabhängige Validierung durch Biotech Germande
- Mit zahlreichen Endoskopmarken getestet

VOLLSTÄNDIGER SCHUTZZYKLUS

Als globaler Vorreiter im Bereich der Infektionsprävention erhalten Sie nur bei Cantel den vollständigen Schutzzyklus, eine vollwertige, proaktive Strategie der Partnerschaft, die Ihnen dabei hilft, Risiken zu eliminieren, die betriebliche Effizienz zu maximieren und Ihren Erfolg zu optimieren.

TROCKNUNG UND LAGERUNG Bakterien sind ein erhebliches Risiko während des Transports und der Lagerung von Endoskopen. Cantels Lösungen für Transport, Trocknung und Lagerung von Endoskopen bieten Schutz für wertvolle Bestände, reduzieren Berührungspunkte für Kreuzkontaminationen, beseitigen Feuchtigkeit aus Endoskopkanälen und ermöglichen eine Feuchtigkeitskontrolle. Eine höhere Feuchtigkeit oder Nässe in Endoskopkanälen fördert bekanntermaßen das Bakterienwachstum.



Produktspezifikationen SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transport

SPEZIFIKATIONEN	
Modell	SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transport
Aufbereitungsdauer (Beginn bis Ende)	Etwa 8 Minuten (Lumen-Endoskope) Etwa 2 Minuten (Nicht-Lumen-Endoskope)
Maße	530 mm B x 740 mm T x 1360 mm H
Leistungsbedarf	13 A 220 - 240 V
Betriebsanforderungen	Vollständig mobil auf 4 separat arretierbaren Rollen
Aufstellraum	Die Einheit benötigt keinen zusätzlichen Belüftungsraum und kann an einer Wand oder zwischen anderen Geräten platziert werden
Validierung	Biotech Germande nach NFS 98-030



BESTELLINFORMATIONEN SURESTORE™ ENDOSKOPLAGERUNG UND -TRANSPORT		
ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ANZAHL/VE
100600DE	1 x SURESTORE™ Lagerungs- und Transporteinheit 12 x SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transportsystem Transportschalen 1 x 5 Liter N-SURE™ Lösung 50 x SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transportsystem Vakuumbbeutel 1 x Label Drucker 50 x SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transportsystem Tracking Labels 45 x SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transportsystem Sterile Sammelpads 50 x CLEANASCOPE™ Foliensets	1
100602	N-SURE™ Lösung 5L	1
100604	SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transportsystem Vakuumbbeutel	50
100728	SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transportsystem Sterile Sammelpads	225
100606	SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transportsystem Transportschale	1
700334	SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transportsystem Tracking Labels	300
200018	SURESTORE™ Endoskoplagerung und -transportsystem HEPA Luftfilter	1
103580	CLEANASCOPE™ steriles Folienset (rote und grüne Folien mit Bodenauskleidung)	200
100521	TRAVELSCOPE™ Transportkoffer	1
100514	SURESTORE™ Vakuumananschluss	1
100700	SURESTORE™ Versiegelungswerkzeug	1
100720	SURESTORE™ QR Karte	1

SURESTORE™, CLEANASCOPE™, TRAVELSCOPE™, und N-SURE™ sind Marken von Cantel (UK) Limited.
ADVANTAGE PLUS™ ist eine Marke der Medivators Inc.
Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer:nc.

© 2017-2021 Cantel. Alle Rechte vorbehalten. Das Diagramm "VOLLSTÄNDIGER SCHUTZZYKLUS" ist eine Marke im Besitz von Cantel Medical Corp. und unterliegt dem Urheberrechtsschutz im Besitz von Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu/de

BESTELLANNAHME | t: +49 (0) 821 27893 920 (Kundendienst)

f: +49 (0) 821 27893 79 | e: csde@cantelmedical.de

© 2021 Cantel Medical Corp. 50098-1583/C-DE

